


SINGLE USE HASSON/BLUNT PORT SYSTEM INSTRUCTIONS FOR USE

Including sterile packaged Single-Use Cannula and Hasson Trocar System



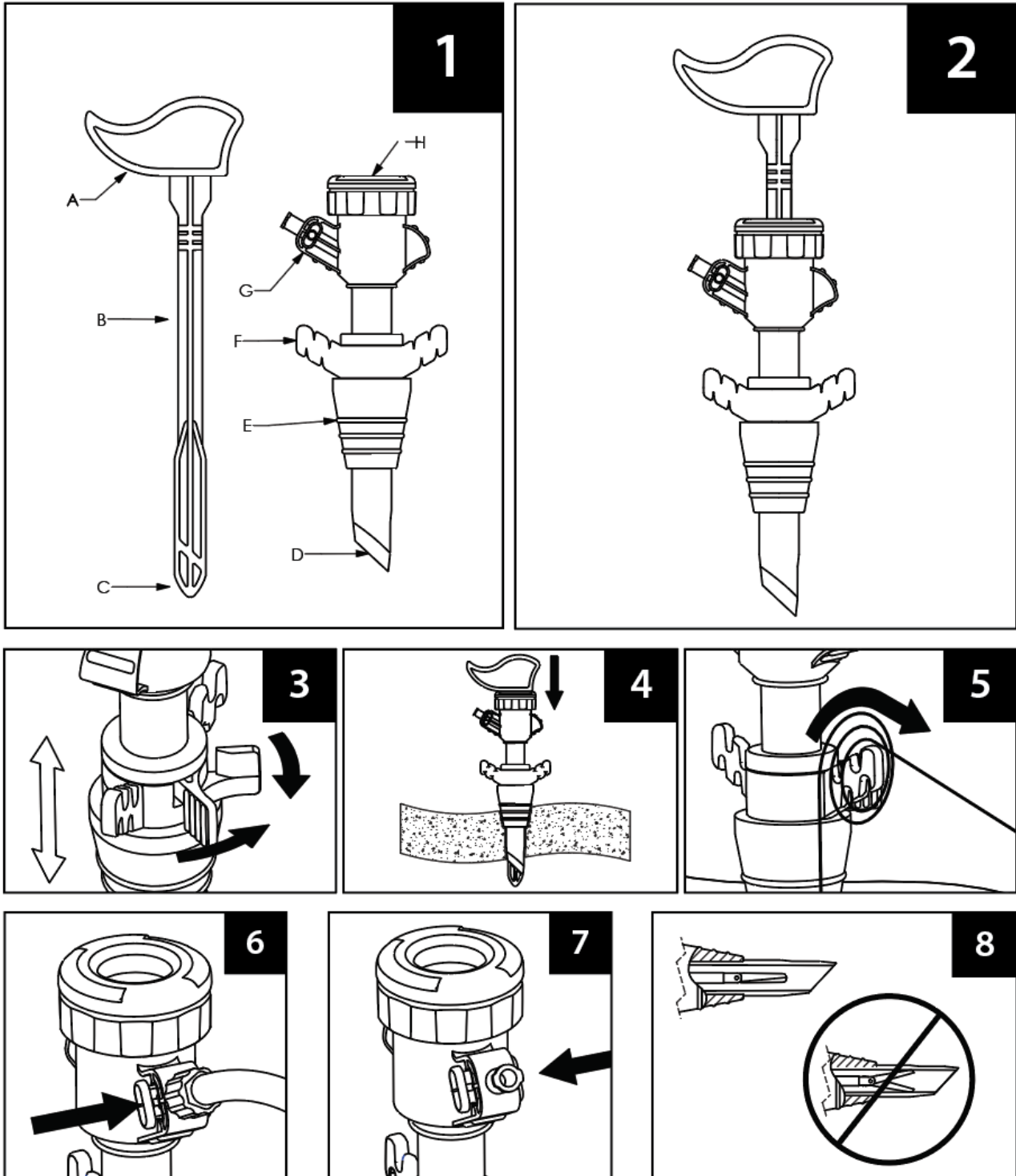

BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY.

IMPORTANT!

1. This booklet is designed to assist using this product. It is not a reference to surgical techniques.
2. This device was designed, tested and manufactured for single use patient use only.
3. Reuse of this device may lead to its failure and subsequent patient injury.
4. Reprocessing and/or re-sterilization of this device may create risk of contamination and patient infection.
5. Do not reuse, reprocess or re-sterilize this device

DESCRIPTION/INDICATIONS FOR USE

GENICON trocar/cannula systems are intended for surgical insertion into the peritoneal cavity for the purpose of establishing a port of entry for instrumentation and for visualization during laparoscopic for primary and secondary insertions. These devices have applications in gynecologic, general, thoracic, and urologic endoscopic procedures.

CONTRAINDICATIONS

The use of GENICON laparoscopic and endoscopic products is contraindicated whenever endoscopic surgical techniques are contraindicated for any reason. Contraindications relevant to individual GENICON products are noted in the specific sections.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. Endoscopic surgery should be performed only by physicians who are thoroughly trained in endoscopic techniques and failure modes, precautions, and corrective actions in the event of failure.
2. GENICON single-use products are intended for single patient use only – DO NOT RESTERILIZE.
3. Do not use any pre-sterilized products if the packaging sterile barrier is damaged
4. Consult medical literature or country specific regulations for specific techniques, complications, and hazards prior to procedure.
5. Care must be taken when using laparoscopic instrumentation to avoid damage to major vessels and other anatomic structures.
6. Establish and maintain adequate pneumoperitoneum to reduce the risk of injury to internal structures.
7. Properly position the patient and note anatomical landmarks to introduced devices without unintended damage.
8. Do not use excessive force or in a manner not consistent with normal instrumentation use.
9. A thorough understanding of the principles and techniques involved in laparoscopic electrosurgical procedures is essential to avoid shock and burn hazards to both patient and medical personnel, and damage to the device or other surgical instruments.
10. Carry out electrosurgical procedures using only non-combustible gases (CO₂).
11. Verify that the devices are compatible with other products that will be used in surgery prior to the procedure.
12. Store all products safely in a climate controlled environment and handle with care.
13. All GENICON devices are latex free and sterilized using gamma sterilization, except as noted.
14. Dispose of all used or damaged products using standard hospital practices for biohazard control.
15. Care must be taken when using any trocar/cannula to avoid damage to major vessels and other anatomic structures.
16. The trocar/cannula should be placed under direct endoscopic vision.
17. All instruments should be aligned with the central axis of the cannula when inserting/removing through the seal to minimize the potential of inadvertent damage to the cannula seal. Extra care should be used when inserting and removing angular and/or asymmetrical instruments, such as “J” hooks, Covidien Endo GIA, and clip appliers.

To minimize the risk of such injury, be sure to:

1. Establish and maintain adequate pneumoperitoneum
2. Properly position the patient to help displace organs out of the area of penetration
3. Note important anatomical landmarks
4. Direct the trocar tip away from major vessels and organs
5. Do not use excessive force during insertion
6. Do not use other manufacturer's trocars or cannulae in conjunction with GENICON trocars or cannulae.

POTENTIAL COMPLICATIONS FOR ALL GENICON® PRODUCTS

Potential complications associated with the use of laparoscopic devices include but are not limited to organ or vessel damage/perforation, hemorrhage, hematoma, trocar site hernia, and septicemia/infection.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Inspect all components carefully for damage during shipment, handling or after maintenance. **Refer to picture - -**
 - A. Trocar Handle
 - B. Trocar Shaft
 - C. Blunt Tip
 - D. Cannula Tip
 - E. Suture Cone
 - F. Suture Wings
 - G. CO₂ Luer Port/Valve
 - H. Seal/Cap Assembly
2. Inspect sterile packaging, and verify that sterile barriers are intact. Do not use if package is compromised.
3. Verify that the sizes of all surgical components selected are compatible.
4. Open package using sterile technique and place trocar and cannula (if applicable) on sterile field.
5. Using proper laparoscopy technique, select entry site to ensure the absence of vessels.
6. Assemble by gently pressing the blunt tip obturator through the center of the primary valve assembly in the cannula; applying sterile saline to cannula valve will aid in assembly of trocar into the cannula. **Refer to picture - -**
7. Adjust the cannula anchoring device by squeezing the suture anchor wing tabs together and sliding the cone as needed. **Refer to picture - -**
8. Make an incision large enough to accommodate the size of the trocar sleeve at the site of placement. Bluntly dissect through the fascia and peritoneum using Hasson/open laparoscopy technique. **Refer to picture - -**
9. Using two sutures of adequate tensile strength, pass one through each fascial edge, and tag them.
10. Immediately after insertion of the device, inspect the puncture site for excessive bleeding and assess for organ/vessel damage. Institute appropriate treatment if injury occurs.
11. Remove the obturator. Tighten the anchoring device against the body wall if necessary to secure the system during use.
12. Wrap fascial sutures around the notches on the suture wings at least three times to secure the assembly. **Refer to picture - -**

13. The insufflation (CO₂) valve is packaged in the CLOSED position (red slide valve fully depressed). To insufflate the abdomen, attach the CO₂ supply to the luer connection, and press the green colored slide valve fully. **Refer to picture -** To stop insufflation and close the valve, press the red colored slide valve fully. **Refer to picture -**
14. Instruments should not be opened while inside the cannula. **Refer to picture -**
15. After surgery, remove the suture from the anchoring device. Squeeze the suture anchor wing tabs together, and turn the suture anchor until it loosens from the fascia. **Refer to picture -** Remove the cannula. Use suture to close the trocar site.

ESPAÑOL

 **ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO, LEA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.**

¡IMPORTANTE!

1. Este cuadernillo está diseñado para ayudar a usar este producto. No es una referencia a técnicas quirúrgicas.
2. Este dispositivo fue diseñado, probado y fabricado para el uso exclusivo en un solo paciente.
3. Reutilizar este dispositivo puede resultar en fallas y, consecuentemente, en lesiones en el paciente.
4. Volver a procesar y/o esterilizar este dispositivo puede crear riesgo de contaminación o infección en el paciente.
5. No vuelva a usar, procesar o esterilizar este dispositivo.

DESCRIPCIÓN/INDICACIONES PARA SU USO

Los sistemas de trocar/cánula de GENICON están indicados para la inserción quirúrgica en la cavidad peritoneal con el fin de establecer un puerto de entrada para el instrumental y para la visualización durante la laparoscopia en inserciones primarias y secundarias. Estos dispositivos se aplican en procedimientos endoscópicos ginecológicos, generales, torácicos y urológicos.

CONTRAINDICACIONES

El uso de los productos laparoscópicos y endoscópicos GENICON está contraindicado en aquellas técnicas quirúrgicas endoscópicas que están contraindicadas por cualquier motivo. Las contraindicaciones pertinentes a cada uno de los productos GENICON se indican en las secciones específicas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. La cirugía endoscópica sólo debe ser realizada por médicos estrictamente capacitados en técnicas endoscópicas y en modos de fallas, precauciones y acciones correctivas en caso de fallas.
2. Los productos desechables GENICON sólo están destinados para el uso exclusivo en un solo paciente – NO VOLVER A ESTERILIZAR.
3. No utilice ningún producto pre-esterilizado si la barrera estéril del envoltorio está dañada.
4. Antes del procedimiento, consulte la bibliografía médica o reglamentos específicos del país para obtener información sobre técnicas específicas, complicaciones y riesgos.
5. Se debe tener extrema precaución al utilizar instrumental laparoscópico para evitar provocar daños en los vasos sanguíneos principales y otras estructuras anatómicas.
6. Establezca y mantenga un neumoperitoneo adecuado para reducir el riesgo de lesiones en estructuras internas.
7. Coloque debidamente al paciente y detecte puntos de referencia anatómicos para dispositivos introducidos sin daños no pretendidos.
8. No aplique fuerza excesiva o de manera no consistente con el uso normal del instrumental.
9. Es esencial contar con un máximo entendimiento de los principios y técnicas involucrados en los procedimientos laparoscópicos electroquirúrgicos para evitar riesgos de shock y quemaduras tanto para el paciente como para el personal médico, y daños al dispositivo o a otros instrumentos quirúrgicos.
10. Cumpla con los procedimientos electroquirúrgicos usando solamente gases incombustibles (k.o.).
11. Previo al procedimiento, verifique que los dispositivos sean compatibles con otros productos que se utilizarán en la cirugía.
12. Almacene todos los productos de manera segura en un ambiente con clima controlado y manipúlelos con cuidado.
13. Todos los dispositivos GENICON no contienen látex y se esterilizan mediante esterilización gamma, salvo indicación contraria.
14. Deseche todos los productos utilizados o dañados mediante las prácticas hospitalarias estándar para el control de riesgo biológico.
15. Se debe tener extrema precaución al utilizar cualquier trocar/cánula para evitar dañar los vasos sanguíneos mayores y otras estructuras anatómicas.
16. El trocar/cánula debe colocarse bajo visión endoscópica directa.
17. Todo el instrumental debe estar alineado con el eje central de la cánula al introducirlo/retirar a través del sello para minimizar la posibilidad de dañar de forma inadvertida el sello para la cánula. Se debe prestar especial atención al insertar y retirar instrumentos angulares y / o asimétricos, tales como ganchos "J" y aplicadores de clip.

Para minimizar el riesgo de lesiones, asegúrese de:

1. Establecer y mantener un neumoperitoneo adecuado
2. Colocar debidamente al paciente para desplazar los órganos fuera del área de penetración
3. Detectar puntos de referencia anatómicos importantes
4. Dirigir la punta del trocar lejos de los vasos sanguíneos mayores y de los órganos
5. No utilizar fuerza excesiva durante la inserción
6. No utilizar los trócares o cánulas de otros fabricantes conjuntamente con los trócares o cánulas de GENICON.

COMPLICACIONES POTENCIALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS GENICON®

Las complicaciones potenciales relacionadas con el uso de dispositivos laparoscópicos incluyen, sin restricción alguna, las siguientes: daño/perforación de órganos o vasos sanguíneos, hemorragia, hematoma, hernia en orificio de trocar y septicemia/infección.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inspeccione con cuidado todos los componentes en busca de daños ocurridos durante el envío, la manipulación o luego del mantenimiento. **Vea la imagen -**
 - A. Mango del trocar
 - B. Eje del trocar
 - C. Punta roma
 - D. Punta de la cánula
 - E. Cono de sutura
 - F. Aletas de sutura
 - G. Puerto/Válvula luer CO₂
 - H. Ensamblaje de sello/tapa
2. Inspeccione el empaque estéril y verifique que las barreras estériles estén intactas. No utilice el producto si el envoltorio está dañado.
3. Verifique que los tamaños de todos los componentes quirúrgicos seleccionados sean compatibles.
4. Abra el envoltorio utilizando una técnica estéril, y coloque el trocar y la cánula (si se aplica) en un campo estéril.
5. Mediante una técnica adecuada de laparoscopia, seleccione el sitio de entrada para asegurar la ausencia de vasos sanguíneos.
6. Realice el ensamblaje presionando suavemente el obturador de la punta roma a través del centro del ensamblaje de la válvula principal en la cánula; la aplicación de la solución salina estéril a la válvula de la cánula contribuirá al ensamblaje del trocar dentro de la cánula. **Vea la imagen -**

7. Ajuste el dispositivo de anclaje de la cánula apretando las pestañas de anclaje de las aletas de sutura juntas y desplazando el cono según sea necesario. **Vea la imagen - -**
8. Realice una incisión lo suficientemente grande como para acomodar el tamaño de la vaina del trócar en el sitio seleccionado. Diseccione a través de la fascia y el peritoneo utilizando la técnica laparoscópica abierta de Hasson. **Vea la imagen - -**
9. Utilizando dos suturas de resistencia adecuada, pase una a través de cada borde fascial, y luego márquelas.
10. Inmediatamente luego de la inserción del dispositivo, inspeccione el sitio de punción en busca de sangrado en exceso y asegúrese de que no se hayan provocado daños en órganos/vasos sanguíneos. Aplique el tratamiento adecuado en caso de lesión.
11. Retire el obturador. Ajuste el dispositivo de anclaje contra la pared del cuerpo, de ser necesario, para asegurar el sistema durante el uso.
12. Envuelva las suturas fasciales alrededor de las ranuras ubicadas en las aletas de sutura al menos tres veces para asegurar el ensamblaje. **Vea la imagen - -**
13. La válvula de insuflación (CO₂) se empaqueta en posición CERRADA (la válvula corrediza roja completamente presionada). Para insuflar el abdomen, ajuste el suministro de CO₂ a la conexión luer, y presione completamente la válvula corrediza de color verde. **Vea la imagen - -** Para detener la insuflación y cerrar la válvula, presione completamente la válvula corrediza de color rojo. **Vea la imagen - -**
14. No deben abrirse los instrumentos mientras están dentro de la cánula. **Vea la imagen - -**
15. Luego de la cirugía, retire la sutura del dispositivo de anclaje. Apriete las pestañas de anclaje de las aletas de sutura juntas, y gire el anclaje de la sutura hasta que se desprenda de la fascia. **Vea la imagen - -** Retire la cánula. Utilice sutura para cerrar el sitio de incisión del trócar.

ITALIANO



PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI.

IMPORTANTE!

1. L'opuscolo si propone di agevolare l'utilizzazione del prodotto. Non è un documento da consultare per tecniche chirurgiche.
2. Il dispositivo è stato progettato, collaudato e fabbricato solo per l'impiego su un unico paziente.
3. La riutilizzazione del dispositivo può provocare il guasto e di conseguenza causare lesioni al paziente.
4. Il ritrattamento e/o la risterilizzazione del dispositivo possono condurre al rischio di contaminazione e di infezione a danno del paziente.
5. Non riutilizzare, ritrattare o risterilizzare il dispositivo.

DESCRIZIONE/INDICAZIONI D'USO

I sistemi trocar/cannula GENICON sono previsti per l'inserimento chirurgico nella cavità peritoneale allo scopo di creare un foro di entrata per la strumentazione e la visualizzazione in laparoscopia per inserimenti primari e secondari. Questi dispositivi sono indicati per interventi endoscopici ginecologici, generici, toracici e urologici.

CONTROINDICAZIONI

L'uso di prodotti laparoscopici ed endoscopici GENICON è controindicato in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, tecniche chirurgiche endoscopiche siano controindicate. Le controindicazioni relative a singoli prodotti GENICON sono segnalate nelle specifiche sezioni.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. La chirurgia endoscopica deve essere eseguita solo da medici esperti in tecniche endoscopiche e modalità dei guasti nonché nelle precauzioni e nelle misure correttive da assumere in caso di guasto.
2. I prodotti monouso GENICON sono destinati a un singolo paziente – **NON RISTERILIZZARE.**
3. Non usare prodotti presterilizzati se la barriera sterile della confezione risulta danneggiata.
4. Prima dell'intervento, consultare le pubblicazioni mediche o i regolamenti vigenti nel Paese per quanto riguarda tecniche, complicanze e pericoli.
5. Quando si utilizzano strumenti laparoscopici, è necessario adottare le dovute precauzioni per evitare danni ai grossi vasi e ad altre strutture anatomiche.
6. Per ridurre il rischio di lesioni a strutture interne, stabilire e mantenere un adeguato pneumoperitoneum.
7. Posizionare correttamente il paziente e marcare i punti di reperi per introdurre dispositivi senza danni involontari.
8. Non forzare gli strumenti o utilizzarli in modo non conforme all'uso normale.
9. È indispensabile possedere una conoscenza approfondita di principi e tecniche dell'elettrochirurgia laparoscopica per evitare pericoli di elettrocuzione e ustione a pazienti e personale medico nonché danni al dispositivo o ad altri strumenti chirurgici.
10. Eseguire gli interventi elettrochirurgici utilizzando solo gas non combustibili (CO₂).
11. Prima dell'intervento, verificare che i dispositivi siano compatibili con gli altri prodotti da utilizzare nell'operazione chirurgica.
12. Conservare tutti i prodotti in condizioni di sicurezza e in ambiente climaticamente controllato. Maneggiare con cura.
13. Tutti i dispositivi GENICON sono privi di lattice e sterilizzati con raggi gamma, salvo nei casi specificati.
14. Smaltire tutti i prodotti usati o danneggiati secondo la normale prassi ospedaliera per materiali a rischio biologico.
15. Per evitare danni a vasi principali e ad altre strutture anatomiche, adottare le necessarie precauzioni nell'uso di trocar-cannula.
16. Utilizzare il trocar-cannula sotto diretta visione endoscopica.
17. Tutti gli strumenti devono essere allineati con l'asse centrale della cannula durante l'inserimento/rimuovere attraverso la guarnizione, per minimizzare la possibilità di danno accidentale alla guarnizione della cannula. Prestare particolare attenzione durante l'inserimento e rimuovere di strumenti angolari o asimmetrici, quali ganci a "J" e applicatori di clip.

Per ridurre il rischio di lesioni, assicurarsi di:

1. Creare e mantenere un adeguato pneumoperitoneo
2. Posizionare il paziente in modo che gli organi si trovino fuori del punto di penetrazione
3. Notare i punti di reperi importanti
4. Dirigere la punta del trocar lontano da vasi e organi principali
5. Non usare un'eccessiva pressione durante l'inserimento
6. Non usare trocar o cannule di altri produttori insieme a trocar o cannule GENICON.

POSSIBILI COMPLICANZE PER TUTTI I PRODOTTI GENICON®

Le possibili complicanze associate all'utilizzazione di dispositivi laparoscopici comprendono, tra l'altro, danno/perforazione di organi o vasi, emorragia, ematoma, ernia inguinale e setticemia/infezione.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Ispezionare accuratamente tutti i componenti per verificare che non rechino danni dovuti a spedizione, maneggio o manutenzione. **Foto - -**
 - A. Impugnatura del trocar
 - B. Stelo del trocar
 - C. Punta smussa
 - D. Punta della cannula
 - E. Cono per sutura
 - F. Alette per sutura
 - G. Porta/Valvola luer CO₂
 - H. Gruppo tappo/guarnizione

2. Ispezionare la confezione sterile e verificare che le barriere sterili siano intatte. Non utilizzare se la confezione è compromessa.
3. Verificare che le misure di tutti i componenti chirurgici selezionati siano compatibili tra loro.
4. Aprire la confezione usando una tecnica sterile e sistemare trocar e cannula (se è il caso) nel campo sterile.
5. Utilizzando un'ideale tecnica laparoscopica, selezionare il punto di entrata in modo da accertarsi che non vi siano vasi sanguigni.
6. Assemblare il dispositivo, inserendo con una leggera pressione l'otturatore a punta smussa nel centro del gruppo valvola primaria; l'applicazione di soluzione fisiologica sterile alla valvola della cannula rende più agevole l'assemblaggio del trocar nella cannula. **Foto - -**
7. Regolare il dispositivo di ancoraggio della cannula premendo insieme le alette di fissaggio della sutura e facendo scorrere il cono di quanto è necessario. **Foto - -**
8. Praticare un'incisione larga quanto basta per accogliere il manicotto del trocar nel punto di posizionamento. Dissecare direttamente attraverso la fascia e il peritoneo usando la tecnica di Hasson/laparoscopia aperta. **Foto - -**
9. Usare due suture di adeguata resistenza alla trazione, passandone una attraverso ciascun margine fasciale e ancorarle.
10. Immediatamente dopo l'inserimento del dispositivo, ispezionare il punto di incisione per verificare che non presenti un sanguinamento eccessivo e per escludere danni vascolari o ad organi. In caso di lesioni, ricorrere a trattamento idoneo.
11. Rimuovere l'otturatore. Se necessario, stringere il dispositivo di ancoraggio alla parete corporea per fissare il sistema durante l'utilizzazione.
12. Avvolgere almeno tre volte le suture fasciali intorno alle tacche sulle alette di sutura per fissare bene il gruppo. **Foto - -**
13. La valvola per insufflazione (CO₂) è confezionata in posizione CHIUSA (valvola rossa a saracinesca premuta fino in fondo). Per insufflare l'addome, collegare la provvista di CO₂ al connettore luer e premere fino in fondo la valvola verde a saracinesca. **Foto - -** Per arrestare l'insufflazione e chiudere la valvola, premere fino in fondo la valvola rossa a saracinesca. **Foto - -**
14. Non aprire gli strumenti quando sono inseriti nella cannula. **Foto - -**
15. Dopo l'intervento chirurgico, rimuovere la sutura dal dispositivo di ancoraggio. Premere insieme le alette di ancoraggio della sutura e ruotare l'ancoraggio fino a quando si allenta dalla fascia. **Foto - -** Rimuovere la cannula. Servirsi di sutura per chiudere il punto di inserimento del trocar.

英语



使用本产品前，请认真阅读下列信息。

注意！

1. 本小册子旨在帮助使用本产品，它不是外科手术的参考资料。
2. 本装置专为单个病人一次性使用而设计、测试和制造。
3. 若再次使用本装置，可能会导致它发生故障，从而导致患者受伤。
4. 对本装置进行再处理和/或重新消毒，可能造成污染以及患者感染的风险。
5. 不得再次使用、重新处理或重新消毒本装置。

使用说明/指南

GENICON套针/套管系统用于在手术中插入腹腔来建立入口，供器械进入以及供腹腔镜主切口口的目视观察。这些装置已经用于妇科、普通、胸科和泌尿科内窥镜操作中。

禁忌症

无论出于何种原因而禁止采用内窥镜外科技术，则禁止使用GENICON腹腔镜检查和内窥镜检查产品。单个GENICON产品的禁忌，请参见具体章节说明。

警告和注意事项

1. 仅有在内窥镜使用方法和故障模式、注意事项以及出现故障时的纠正措施等方面受过严格培训的医生，才允许进行内窥镜手术。
2. 若无菌包装屏障受损，则该产品消毒失效，不得再使用。
3. 具体方法、并发症以及危害，请在手术前查阅医学文献或者所在国的法规。
4. 腹腔镜仪器使用时请小心，防止损坏主要血管和解剖结构。
5. 建立并保持充足的气腹，减少内部结构受损的风险。
6. 将患者置于合适的位置，并在引入装置上标记解剖标记点。上述过程不得造成意外损害。
7. 施加的力要与正常仪器使用的力一致，不得用力过大。
8. 认真了解腹腔镜检查电外科手术的原则和方法，避免患者和医疗人员出现休克和烧伤的危害，防止装置或其他手术器械损坏。
9. 仅使用非易燃气体（CO₂）进行电外科手术。
10. 手术前确定本装置与外科手术中使用其他产品兼容。
11. 在气候受控环境条件下，安全贮存产品，小心轻放。
12. GENICON一次性产品设计只供单个病人使用，不要再消毒。
13. 除非另有说明，所有GENICON装置不含乳胶，并使用伽马射线灭菌。
14. 按照医院标准生物危害控制惯例，处理所有已使用或受损产品。
15. 使用任何套针/套管时必须小心，防止损坏主要血管和其它解剖结构。
16. 套针/套管应当置于内窥镜直接视野中。为了把受伤风险降到最低。
17. 所有器械在插入/移除穿过密封时应与套管的中心轴对齐，以减少套管密封意外损坏的可能性。当插入和移除存在角度和/或非对称器械时，如“J”型钩和施夹器时，应格外小心。

要确保：

1. 建立并保持足够的气腹
2. 正确安排病人体位有助于让器官避开穿透区
3. 注意重要的解剖标志
4. 套针尖要避开主要血管和器官
5. 在插入中不要用力太大
6. 不要把GENICON的套针或套管与其它厂商的套针或套管一起使用。

使用腹腔镜检查装置的潜在并发症包括但不限于：器官或血管损坏/穿孔、出血、血肿、戳孔疝以及败血症/感染。

使用说明

1. 仔细检查所有部件，看是否有运输、操作或维护造成的损坏。参见图- -
 - A. 套针柄
 - B. 套针杆
 - C. 钝尖

- D. 套管尖
- E. 缝合线锥
- F. 缝合线翼
- G. 二氧化碳鲁尔(Luer)口/阀
- H. 密封/帽组件

2. 检查无菌包装，确认无菌屏障完好无损。包装损坏后不得使用。
3. 确认所选择的所有手术部件的尺寸符合要求。
4. 用无菌技术打开包装，把套针和套管（如果适用）放在无菌区中。
5. 用正确的腹腔镜技术来选择入口位置以确保避开血管。
6. 轻轻推着钝尖充填体穿过套管中主阀组件的中心来进行装配；给套管阀抹上无菌盐水有助于把套针装入套管内。参见图- -
7. 把缝合线锚翼片捏在一起，并按需要滑动缝合线锥，就可以调整套管锚固装置。参见图- -
8. 确保切口要足够大，在放置处要能容纳套针套管的尺寸。用哈森(Hasson)/开放腹腔镜技术，慢慢切开筋膜和腹膜。参见图- -
9. 用两根有合适拉伸强度的缝合线，让一根线穿过筋膜的每个边缘，然后标记它们。
10. 在插入装置后，立即检查穿刺处是否出血过多，并评估器官/血管是否受损。如果发生受伤，进行合适的治疗。
11. 拿掉充填体。如有必要，把锚固装置紧靠体壁以在使用中固定系统。
12. 把筋膜缝合线在缝合线翼的凹口上绕至少三圈以固定组件。参见图- -
13. 注气（二氧化碳）阀在包装中处于关闭位置（红色滑阀被完全按下）。为向腹部注气，把二氧化碳气源接到鲁尔接口，然后把绿色滑阀完全按下。参见图- -
如想停止注气和关闭阀门，完全按下红色滑阀。参见图- -
- 14.
15. 器械在套管中时不能打开。参见图- -
16. 在手术后，要把缝合线从锚固装置上拿下。把缝合线锚翼片捏在一起，然后转动缝合线锚，直到它从筋膜上松开。参见图- -撤除套管。用缝合线封闭套针入口。

This product may be covered by one or more U.S. patents and their foreign counter parts. Other Patents may be pending. GENICON and the GENICON logo design are U.S. registered trademarks of GENICON Rights Reserved.

Disclaimer of Warranties on Re-Processing or Re-Sterilizing of Vendor's Disposable (Single-Patient) Products: Any reprocessing or re-sterilizing of disposable single patient devices voids Vendor's warranty. Vendor assumes no liability for reprocessed or re-sterilized products. Vendor warrants that reasonable care has been used in the manufacture of these disposable single patient devices and that they are free from defects in workmanship or materials at the time of shipment from Vendor. Vendor's sole obligation shall therefore be to repair or replace any device which it determines was defective at the time of shipment. Because no product is completely effective under all circumstances, and because the actual use and handling of these devices are beyond Vendor's control, Vendor cannot warrant for a good effect or against a bad effect in the application and use of these disposable single patient devices. The Purchaser therefore assumes all liability resulting from re-sterilization or re-processing of these disposable single patient products. Vendor therefore gives no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Vendor will not be liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages resulting from or related to a disposable product that has been re-sterilized or re-processed. Vendor shall not be liable for incidental or consequential loss, damage or expense resulting from the use or application of these said products. This warranty is in lieu of all other warranties, whether implied, express, oral or written, and no individual or entity has the authority to vary the terms of this warranty.














GENICON y el diseño del logotipo de GENICON son marcas registradas de GENICON en los Estados Unidos. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad para casos de garantía de productos vendidos como desechables (para uso de un solo paciente) que hayan sido re-procesados o re-esterilizados: Cualquier re-procesamiento o re-esterilización de dispositivos desechables (para uso de un solo paciente) anulará la garantía del Vendedor. El Vendedor no asume ninguna responsabilidad por productos re-procesados o re-esterilizados. El Vendedor garantiza que se han tomado las precauciones necesarias en la fabricación de estos dispositivos desechables (para uso de un solo paciente) y que están libres de defectos de fabricación o materiales en el momento que el Vendedor hace el envío. Por lo tanto, la única obligación del Vendedor será la de reparar o reemplazar todo dispositivo que considere defectuoso al momento del envío. Debido a que ningún producto es completamente eficaz en todas las circunstancias, y dado que el uso y la manipulación real de estos dispositivos están fuera del control del Vendedor, el Vendedor no puede asegurar un buen resultado o proporcionar garantía frente a resultados desfavorables en la aplicación y el uso de estos dispositivos desechables (para uso de un solo paciente). Por tal motivo, el Comprador asume toda responsabilidad derivada de la re-esterilización o el re-procesamiento de estos productos desechables (para uso de un solo paciente). El Vendedor, por su parte, no proporciona ninguna garantía de comercialización o adaptabilidad para un propósito en particular. El Vendedor no será responsable por ningún daño directo, indirecto, incidental o consecuente que se produzca a raíz de la re-esterilización o el re-procesamiento de un producto desechable. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o gastos derivados o incidentales que surjan del uso o la aplicación de los productos mencionados. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, ya sea implícita, expresa, oral o escrita, y ningún individuo o entidad tiene autoridad para modificar los términos de esta garantía.

Il prodotto può essere tutelato da uno o più brevetti Usa e di altri Paesi. Altri brevetti possono essere in corso di concessione. GENICON e il logo GENICON sono marchi registrati Usa di GENICON Tutti i diritti riservati.

Esclusione di garanzie riguardanti il ritrattamento o la risterilizzazione dei prodotti usa e getta (monopaziente) del Venditore: qualunque ritrattamento o risterilizzazione di dispositivi monopaziente usa e getta invalida la garanzia del Venditore. Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per i prodotti eventualmente ritrattati o risterilizzati. Il Venditore garantisce la realizzazione di questi dispositivi monopaziente usa e getta e che all'atto della spedizione da parte del Venditore gli stessi erano privi di difetti legati alla manodopera o ai materiali. L'unico obbligo del Venditore sarà pertanto di riparare o sostituire qualunque dispositivo che lo stesso avrà ritenuto essere difettoso all'atto della spedizione Dal momento che nessun prodotto risulta del tutto efficace in tutte le circostanze e che l'utilizzo e la manipolazione effettivi di questi dispositivi esulano dal controllo del Venditore, questi non può garantire il successo o escludere effetti negativi conseguenti all'applicazione e all'utilizzo di questi dispositivi monopaziente usa e getta. L'Acquirente si assume pertanto ogni responsabilità derivante dalla risterilizzazione o dal ritrattamento di questi prodotti monopaziente usa e getta. Ne consegue pertanto che il Venditore non fornisce alcuna garanzia di commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico. Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali risultanti da o connessi a un prodotto usa e getta risterilizzato o ritrattato. Il Venditore declina ogni responsabilità per perdite, danni o spese incidentali o consequenziali risultanti dall'utilizzo o dall'applicazione di tali prodotti. La presente garanzia è sostitutiva di tutte le altre garanzie, siano esse implicite, esplicite, orali o scritte e nessun individuo o ente è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia.

本产品可能涉及一项或多项美国专利和其国外专利。其他专利正在申请中。GENICON和 GENICON标志图案为GENICON公司美国注册商标。保留所有权利。

供应商的一次性（单个患者）产品再处理或再灭菌的免责声明：一次性（单个患者）器械的任何再处理或再灭菌均使供应商的保修无效。供应商对再处理或再灭菌产品不承担任何责任。供应商保证，在这些一次性（单个患者）器械的制造过程中已采用合理的注意，使它们在从供应商交付时没有工艺或材料上的缺陷。因此，供应商的唯一责任是维修或更换它确定的在交付时存在缺陷的任何器械。因为没有产品在所有环境下均完全有效，以及这些器械的实际使用和处置超出供应商的控制，供应商不能保证这些一次性（单个患者）器械的应用和使用中的良好效果和抗不良效果。因此，购买者承担对这些一次性（单个患者）器械再处理或再灭菌导致的一切责任。因此，对于特定用途的适销性或适用性，供应商不作任何担保。供应商不为已被再处理或再灭菌的一次性产品导致或相关的任何直接、间接、附带或继发性损害负责。供应商不为上述产品的使用或应用导致的附带或继发性损失、损害和费用负责。本保修将取代所有其他保修，无论是暗示、明示、口头或书面的保修，任何个人或机构无权变更本保修的条款。
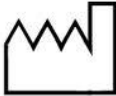
| | | | | | |
|---|----------------------|--|---|----------------------|--|
|  | EN ES IT 英語 | Manufacturer Fabricante Produttore 制造商 |  | EN ES IT 英語 | Single Patient Use Only Para uso exclusivo de un sólo paciente Monouso 限于单个病人使用 |
|  | EN ES IT 英語 | Latex Free Sin lutex Privo di lattice 不含乳胶 |  | EN ES IT 英語 | Sterilized By Irradiation Esterilizado por irradiación Sterilizzato con radiazione 放射消毒 |
|  | EN ES IT 英語 | Do Not Re-Sterilize No volver a esterilizar Non risterilizzare 不得重新消毒 |  | EN ES IT 英語 | Authorized Representative in EU Representante autorizado en la Unión Europea Rappresentante autorizzato UE 欧盟授权代表 |
|  | EN ES IT 英語 | Expiration Date Fecha de vencimiento Da utilizzzare entro il 有效期 |  | EN ES IT 英語 | Authorized For Sale or Use by Physician Only Autorizado para la venta o para el uso sólo por parte de un medico Autorizzato solo per vendita o uso da personale medico 医生授权后方可销售或使用 |
|  | EN ES IT 英語 | Lot Number Número de lote Codice partita 批号 |  | EN ES IT 英語 | eIFU Indicator Indicador eIFU Istruzioni per l'uso eIFU 指示器 |
|  | EN ES IT 英語 | Caution Cuidado Cautela 慎重 |  | EN ES IT 英語 | Do not Use if Package is Damaged No usar si el envoltorio está dañado Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato 包装损坏后不得使用 |
|  | EN ES IT 英語 | Manufacture Date Fecha de fabricacion Data di prduzione 生产日期 | INTENTIONALLY LEFT BLANK | | |



6869 Stapoint Court Suite #114
Winter Park, Florida 32792 USA
TEL: 1-407-657-4851
FAX: 1-407-677-9773
www.geniconendo.com
info@geniconendo.com



European Authorized Representative
Genicon Europe
44 Airedale Avenue
Chiswick, London
United Kingdom W4 2NW
TEL: 44 203 286 3414

